


GRID PAD 8 - 10 - 12 - 15 - TOUCH PAD

start het gesprek

De Grid Pad biedt de ultieme oplossing voor gebruikers van alternatieve communicatietechnologie en is ontworpen voor communicatie de hele dag, iedere dag, met behulp van elke toegangsmethode.

De nieuwe Grid Pad reeks is speciaal ontworpen in samenwerking met OC-gebruikers.

Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen uit enkele varianten: Grid Pad 8, 10, 12, 15 of Touch Pad

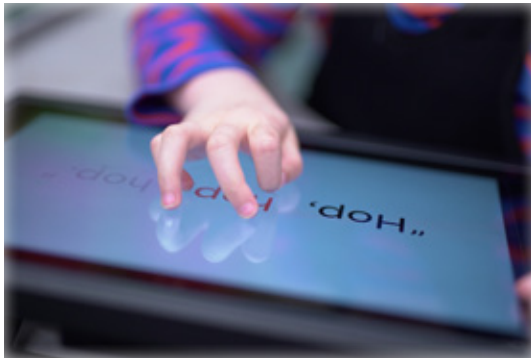

GRID PAD 12 EN 15

Grid Pad 12 en 15 zijn toonaangevende communicatiehulpmiddelen. Ze zijn gebouwd op een hoogstaand computerplatform en geschikt voor alle belangrijke oogbesturingcamera's. Dit speciale apparaat heeft een lange batterijlevensduur van 15 resp. 14 uur, een robuust ontwerp en meerdere toegangsmogelijkheden om ervoor te zorgen dat u altijd uw stem hebt.



Belangrijkste toepassingen Grid Pad 12/15

- Hoge prestatie computerplatform voor snelle communicatie
- 15/14 uur batterijduur (10/9 uur met oogbesturing)
- Klaar voor gebruik met oogbesturing, schakelaars, aanraken en USB apparaten
- Schokbescherming, valbestendig tot 1 meter
- 12,5"/15,6" full HD anti-reflecterend aanraakscherm
- Aan/uit knop met afstandstandbediening
- Hoge kwaliteit versterkt geluid
- Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood omgevingsbediening
- Tactiele, waterbestendige knoppen op praktische locaties
- Multi-hoek standaard en rolstoelbevestiging



Aan/uit afstandsbediening

Toegang met oogbesturing

Grid Pad 12 en 15 werken met alle vooraanstaande oogbesturingstechnologieën.

Een speciaal ontwikkelde oogbesturingsmodule is beschikbaar voor de EyeTech TM5 of Irisbond Duo camera. Deze module verandert de Grid Pad 12 en 15 in een geïntegreerd communicatiehulpmiddel voor oogbesturing. Voor de Alea Intelligaze is een beugel beschikbaar.



Adapter voor TM5 of Irisbond



Meeleesvenster en tweede scherm

Grid Pad 15 heeft als extra functie een meeleesscherm aan de achterzijde van het apparaat. Zo kan de gesprekspartner tegenover de gebruiker plaatsnemen en kunnen beide elkaar in de ogen kijken, maar ook beiden het scherm lezen.

Daarnaast is het ook mogelijk een extra monitor aan te sluiten voor nog meer mogelijkheden.

GRID PAD 8 EN 10

Grid Pad 8 en Grid Pad 10 zijn kleinere en lichtere alternatieven voor Grid Pad 12. Deze draagbare apparaten met meerdere toegangsopties worden geleverd in een robuuste behuizing en kunnen worden gemonteerd of gebruikt met een schouderriem en handvat.



Grid Pad 10



Grid Pad 8

Belangrijkste toepassingen

- Draagbaar, multi-toegankelijk communicatiehulpmiddel
- Klaar voor gebruik met aanraken, schakelaars en USB apparaten
- Hoge kwaliteit versterkt geluid
- 10"/8" HD stevig aanraakscherm
- Ingebouwde radiofrequent en Infra Rood

omgevingsbediening

- Rolstoelbevestiging en ingebouwde standaard
- Schouderband en handgreep
- Robuuste behuizing
- Geleverd met Grid 3

EIGENSCHAPPEN GRID PADS 8-10-12-15

Schakelaar invoer

Er zijn twee ingebouwde poorten voor schakelaars. Deze speciaal versterkte poorten zijn ook verzonken voor extra bescherming.

Auditieve terugkoppeling

De hoofdtelefoonaansluiting kan worden gebruikt voor auditieve terugkoppeling, handig voor mensen met een visuele beperking. In Grid 3 kunt u horen wat een cel zal zeggen voordat u ervoor kiest om het te selecteren.

Gebouwd om gehoord te worden

De geïntegreerde luidsprekers van Grid Pad zijn ontworpen om geluid en volume van hoge kwaliteit te produceren - om uw boodschap effectief over te brengen, waar u ook bent.

Montage- en positioneringsopties

De montage mogelijkheden van Rehadapt en Daessy bieden u keuze en flexibiliteit in elke omgeving.

Omgevingsbediening

Grid Pad wordt geleverd met ingebouwde Infra Rood en radiofrequent omgevingsbediening. Op de Grid Pad 12 en 15 zit een Infra Rood leervenster aan de voorkant om het invoeren van opdrachten eenvoudiger te maken.

Er is een uitgebreide folder van Grid 3 beschikbaar. Kijk op onze website of vraag hem op.

Grid 3 gratis uitproberen

Op de website www.thinksmartbox.nl leest u hoe u Grid 3 software **60 dagen gratis** kunt uitproberen.



GRID PAD TOUCH PAD

Touch Pad is een lichtgewicht apparaat dat gemaakt is om met aanraken te bedienen met aanraken. Het is perfect voor gebruikers die een krachtig en draagbaar apparaat met een lange batterijduur en een luidspreker nodig hebben.



Handvat

Voor een goede draagbaarheid is het apparaat afgewerkt met rubber. Dit zorgt voor comfortabele grip en voorkomt dat het apparaat van de tafel glijdt.

Montageplaat optie

Een gecombineerde Rehadapt & Daessy-montageplaat is beschikbaar als optionele extra.

Standaard


De instelbare ingebouwde standaard kan worden aangepast voor gebruik op een bureau of een vlakke ondergrond.

Robuuste koffer

Touch Pad wordt beschermd door een robuuste behuizing (valtest tot 1 m), waardoor deze robuust en duurzaam is en geschikt voor communicatie onderweg.

Belangrijkste toepassingen

- Snelle en draagbare communicatie
- Snelle Intel-processor
- 8 uur batterijduur
- Lichtgewicht apparaat van 1 kg
- 10" anti-schittering scherm
- Luide en heldere luidspreker
- Robuuste beschermhoes
- Toetsenraster compatibel
- Magnetische laadpoorten
- Geschikt voor Grid 3

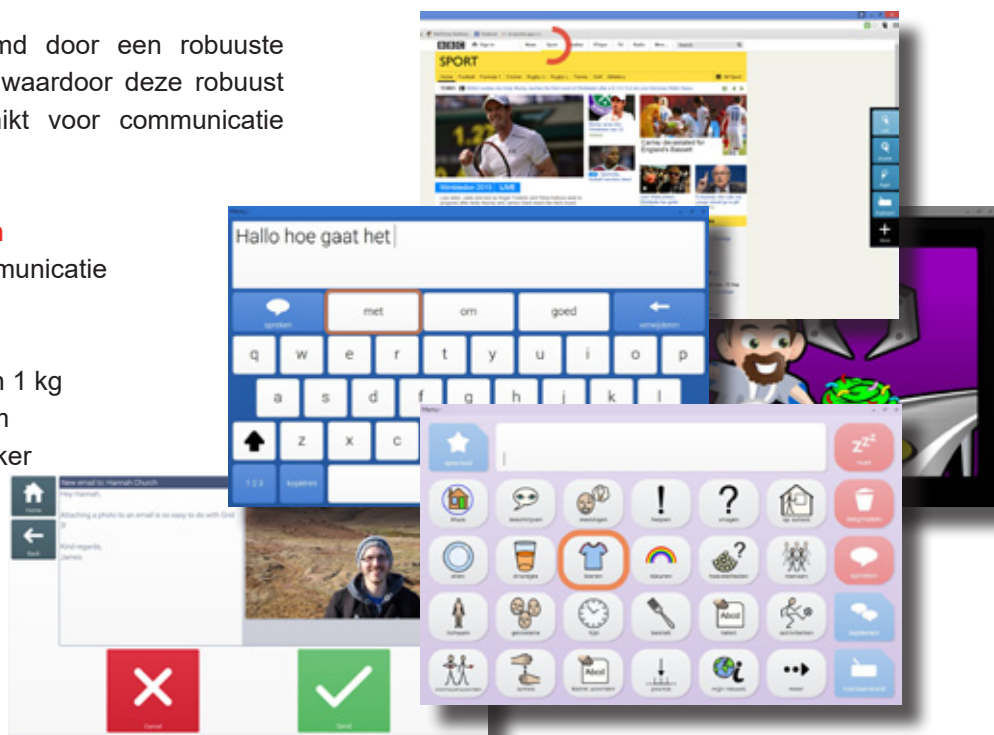

GRID 3

Grid 3 software stelt mensen met een handicap over de hele wereld in staat om te communiceren, hun omgeving te bedienen en hun Windows-computer te besturen. U kunt Grid 3 gebruiken met elk type toegang: oogbesturing, aanraken, directe selectie, aanwijzer en/of schakelaar.

Voor de verschillende niveaus van geletterdheid zijn grid sets ontwikkeld. Van actie-reactie training tot volledige geletterdheid. Voor mensen die met symbolen communiceren en/of met tekst. Voor gebruik van social media, of het leren met spelletjes, van omgevingsbediening tot het bedienen van de computer.

Artikelnummer

0544-08-01	Grid Pad 8
0544-10-03	Grid Pad 10
0544-12-02	Grid Pad 12
0544-15-01	Grid Pad 15
0544-10-ST	Grid Pad Touch Pad
0503-00	Grid 3

Voor mogelijkheden met een iPad hebben we een afzonderlijke folder gemaakt: Grid for iPad.



VERGELIJKING GRID PADS

	Touch Pad	Grid Pad 8	Grid Pad 10	Grid Pad 12	Grid Pad 15
HD-weergave	10"	8"	10"	12"	15"
Gewicht	1 kg	1,2 kg	1,4 kg	2,7 kg	3 kg
Batterijduur	8 uur	4 uur	7 uur	15 uur	14 uur
Processor	Intel®Pentium Gold 4415Y 1.6GHz	Atom z3795 1.6GHz (2.4GHz Burst)	Atom z3795 1.6GHz (2.4GHz Burst)	Intel® Core™ i5-7Y54 3.2 GHz	Intel® Core™ i5-7Y54 3.2 GHz
Geheugen / RAM	4GB	4GB	4GB	8GB	8GB
USB-poorten	1 X USB C	2 X USB 2.0	2 X USB 2.0	1 X USB 2.0, 1 x USB 3.0	1 X USB 2.0, 1 x USB 3.0
Windows 10	X	X	X	X	X
Grid 3	X	X	X	X	X
Tabletcamera	X	X	X	X	X
Aan / uit-knop op afstand				X	X
Oogbesturing				X	X
Schakelaar		X	X	X	X
Hoofdtelefoonpoort	X	X	X	X	X
Omgevingsbediening		X	X	X	X
Monteerbaar	X	X	X	X	X
Draagbaar	X	X	X		
Schouderriem en stoere tas	X	X	X		